



# IntelliVue zum Mitnehmen

IntelliVue MX40 tragbarer Patientenmonitor

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Bewegungsfreiheit

## **Echtzeit-Überwachung und echte Mobilität**

Machen Sie sich bereit... denn mit dem Philips IntelliVue MX40, der die Vorteile der IntelliVue Patientenüberwachung und Telemetrie in einem einzigen kompakten, tragbaren Monitor kombiniert, steht jetzt ein Gerät zur Verfügung, das es in dieser Form bisher nicht gab. Dank kontinuierlicher EKG-Überwachung und optionaler Pulsoxymetrie können Intermediate-Care-Patienten verschiedener Überwachungsstufen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort innerhalb des Krankenhauses lückenlos vom IntelliVue MX40 überwacht werden.

## **IntelliVue durch und durch**

Das Gerät ist mit der übrigen IntelliVue-Familie harmonisiert – somit ist hohe Anwenderfreundlichkeit bei geringem Schulungsaufwand gewährleistet. Die IntelliVue Informationszentrale bildet einen wesentlichen Bestandteil der IntelliVue MX40-Lösung.

## **Einfache Überprüfung der Identifikation**

Die korrekte Identifikation von Patienten und Geräten ist unerlässlich. Anhand der angezeigten Patientendaten kann sich der Anwender vergewissern, dass der IntelliVue MX40 dem richtigen Patienten zugewiesen ist, nachdem die Aufnahme an der IntelliVue Informationszentrale erfolgt ist.

## **Besser informiert**

Nur eine einfache Berührung des Farb-Bildschirms und Sie haben eine Vielzahl an Parametern direkt beim Patienten verfügbar. Der IntelliVue MX40 vereint die Vorteile moderner Technologie, eines intelligenten Konzepts und innovativer Leistungsmerkmale, die Sie von Philips erwarten – und das alles in einem Gerät, das aufgrund seines geringen Gewichts und seiner kleinen Abmessungen bequem von Ihren mobilen Patienten getragen werden kann. Sie können auf Alarime reagieren und diese überprüfen oder eine leise, beruhigende Umgebung wahren. Und Sie können die Bildschirmformate wählen, die für Sie und Ihre Einrichtung am besten geeignet sind. Mit dem IntelliVue MX40 geht das alles ganz einfach.



## **Persönliche Begleitung**

Der IntelliVue MX40 vereint die Vorteile moderner Technologie, eines intelligenten Konzepts und innovativer Leistungsmerkmale, die Sie von Philips erwarten – und das alles in einem Gerät, das aufgrund seines geringen Gewichts und seiner kleinen Abmessungen bequem von Ihren mobilen Patienten getragen werden kann.

Der Patientenmonitor liefert dem gesamten Klinikteam direkt am Patienten den aktuellsten Patientenzustand und ermöglicht dadurch eine optimale Versorgung.



### **Farb-Touchscreen**

#### **Automatischer Bereitschaftsbetrieb**

zur Verlängerung der Lebensdauer einer Akkuladung und zum gleichzeitigen Schutz der Privatsphäre

Anzeige des Patientenzustands mit einer **einzigen Berührung**

#### **Anzeige von zwei Echtzeit-Kurven**

#### **Vier Bildschirmformate**

**Auswahl des Bildschirmformats** zur einfachen klinischen Beurteilung

#### **Flexible Überwachungsparameter**

**Viele verschiedene Parameter**, z.B. EKG, SpO<sub>2</sub>, nichtinvasiver Blutdruck

#### **Batterien oder Akkus**

Der **Akkustatus** wird am Gerät und an der IntelliVue Informationszentrale angezeigt.



Der Farb-Touchscreen wechselt in den Bereitschaftsbetrieb, um die Akku-Betriebsdauer zu verlängern und um den Schutz der Privatsphäre des Patienten zu gewährleisten. Er kann jedoch mit einem Tastendruck wieder aktiviert werden, damit das Pflegepersonal die Daten sehen kann.



# Alarme zum richtigen Zeitpunkt

## **Passende Alarmfunktion für Ihre Umgebung**


Der IntelliVue MX40 zeigt Alarme für EKG, SpO<sub>2</sub> und NBP an. Das Klinikteam kann auf Alarme reagieren und sie überprüfen oder eine leise, beruhigende Atmosphäre für den Patienten wahren. Durch diese Flexibilität können Alarmmanagement-Richtlinien unterstützt werden, die auf verschiedene klinische Umgebungen zugeschnitten sind, ohne dass dafür zusätzliche Geräte erforderlich sind.

## **Hinzufügen von Parametern ohne zusätzliche Kabel**

Der IntelliVue MX40 Monitor bietet die klinischen und technologischen Fortschritte, mit denen Sie den Arbeitsablauf optimieren, die Versorgung verbessern können und Ihren Patienten gleichzeitig eine größere Bewegungsfreiheit ermöglichen. Durch die Verbindung mit den kabellosen IntelliVue Parametern über Kurzstreckenfunk (SRR) können NBP oder Pulsoxymetrie hinzugefügt werden – und zwar ohne Anschluss zusätzlicher Kabel und der damit verbundenen Stolpergefahr.

## **Nur eine Berührung**

Mit nur einer einzigen Berührung können Sie die aktuellen Alarmeinstellungen, den Alarmverlauf und Vitalparameter-Trends anzeigen oder den Monitor aus dem Bereitschaftsbetrieb aktivieren.

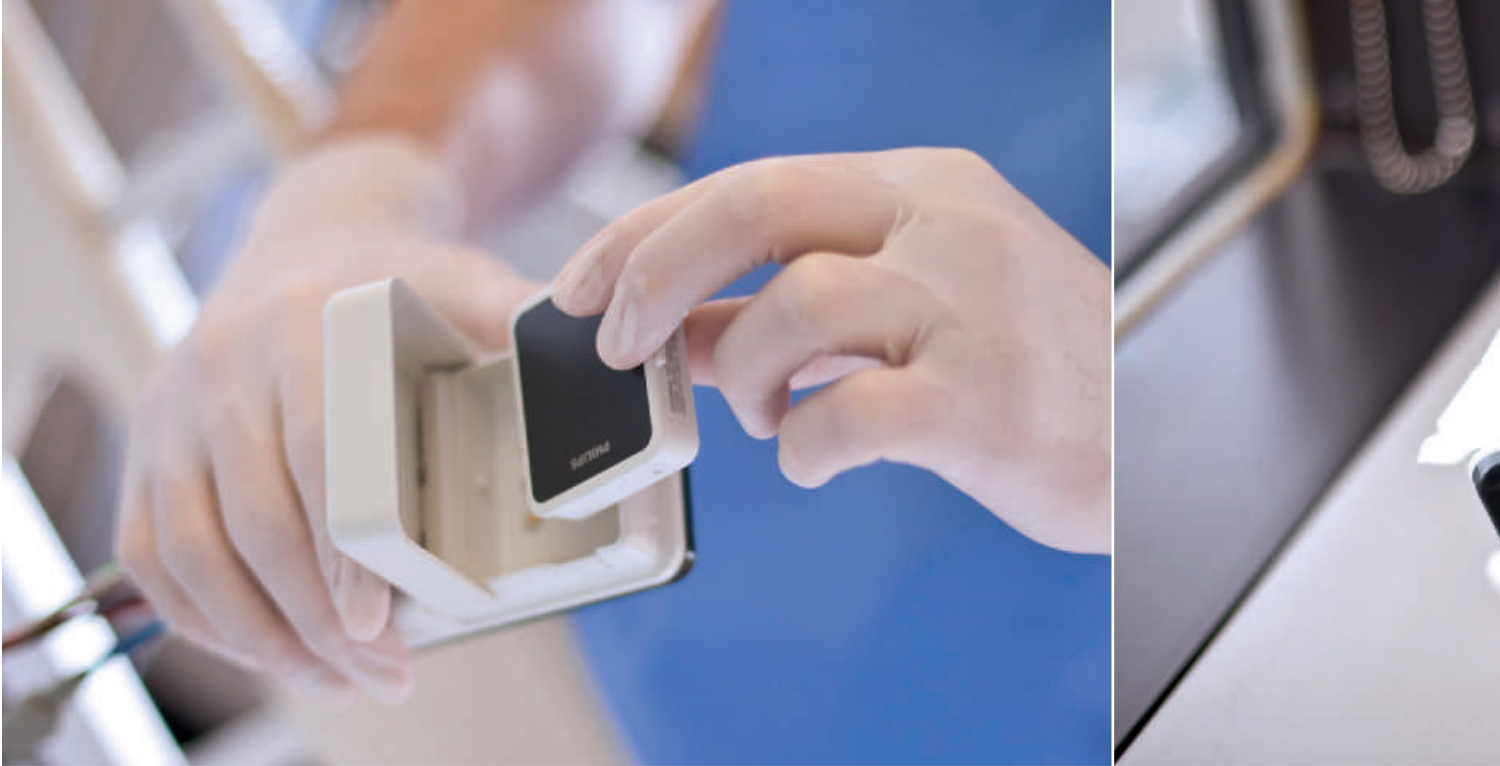

# Unterstützung Ihrer Zielsetzung

Der IntelliVue MX40 hilft bei der Verringerung von Kreuzkontaminationen und unterstützt ökologische Initiativen.

## **Geringeres Risiko von Krankenhausinfektionen**

Bei der Entwicklung des IntelliVue MX40 wurde besonderes Augenmerk auf die Reinigung und Infektionsprävention gerichtet. Der spezielle externe Anschluss verringert die Ansammlung von Schmutz und Flüssigkeiten. Das Gerät selbst hat eine glatte Oberfläche, die leicht abgewischt werden kann. Das Gehäuse kann mit verschiedenen oberflächlich wirksamen bis tiefenwirksamen Standard-Desinfektionsmitteln gereinigt werden und unterstützt auch eine regelmäßige Sterilisation. Philips bietet wiederverwendbare Elektrodenkabel an, um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden.

## **Nachhaltigkeit**

Das Gerät kann wahlweise mit AA-Einwegbatterien oder mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben werden. Bei Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus fällt eine geringere Abfallmenge als bei Verwendung von Einwegbatterien an, wodurch ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet wird. Außerdem lassen sich durch den Einsatz von Akkus die zusätzlichen Kosten für den Kauf von Batterien vermeiden.



Der IntelliVue MX40 ist wasserdicht (gemäß IPX7) und übersteht auch versehentliches Eintauchen in Wasser, Duschen und Reinigung.



**Philips Healthcare  
ist ein Bereich der  
Royal Philips Electronics.**

So erreichen Sie uns:

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)  
[healthcare@philips.com](mailto:healthcare@philips.com)

Asien  
+49 7031 463 2254

Europa, Mittlerer/Naher Osten, Afrika  
+49 7031 463 2254

Lateinamerika  
+55 11 2125 0744

Nordamerika  
+1 425 487 7000  
800 285 5585 (gebührenfrei, nur USA)

Deutschland  
Philips GmbH  
Unternehmensbereich Healthcare  
Lübeckertordamm 5  
20099 Hamburg  
Telefon 040 2899-0  
Fax 040 2899-6666  
E-Mail: [healthcare.deutschland@philips.com](mailto:healthcare.deutschland@philips.com)  
Internet: [www.philips.de/healthcare](http://www.philips.de/healthcare)

Schweiz  
Philips AG Healthcare  
Allmendstraße 140  
8027 Zürich  
Telefon 01 488 2426  
E-Mail: [hc.ch@philips.com](mailto:hc.ch@philips.com)  
Internet: [www.philips.ch/healthcare](http://www.philips.ch/healthcare)

Österreich  
Philips Austria GmbH  
Healthcare  
Triester Straße 64  
1100 Wien  
Telefon 01 60101-0  
E-Mail: [pms.austria@philips.com](mailto:pms.austria@philips.com)  
Internet: [www.philips.at/healthcare](http://www.philips.at/healthcare)



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.

Gedruckt in den Niederlanden.  
4522 962 73883 \* SEP 2011